

# SunShell

## Guard Cartridge Column

### RP & S ガードカートリッジカラム




- "RP" (逆相)はSunShell C18を"S"はSunShell HILIC-Sコアシェルシリカを内径2mm、長さ3mmのカートリッジに充填
- "RP"は全ての逆相カラムに、"S"全てのヒリックカラムに使用可能
- ローテッドボリュウム構造
- 60MPa以上の耐圧
- 内径2.1 mmから4.6 mmまでのカラムに使用可

SunShell C18, 2.6  $\mu$ m 50 x 2.1 mm


ガードカートリッジカラムなし

背圧:10.2 MPa

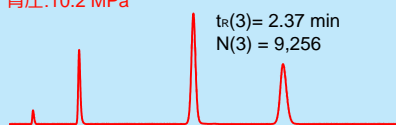

ガードカートリッジカラムRP接続

背圧:10.5 MPa

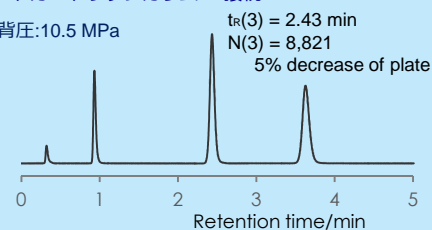

Mobile phase:

CH<sub>3</sub>CN/H<sub>2</sub>O=60/40 for 2.1 mm i.d.

CH<sub>3</sub>CN/H<sub>2</sub>O=70/30 for 4.6 mm i.d.

Flow rate:

0.3 mL/min for 2.1 mm i.d.

1.8 mL/min for 4.6 mm i.d.

Temperature: 25 °C

Detection: UV@250nm

Sample: 1 = Uracil

2 = Ethylbenzoate


3 = Acenaphthene

4 = Butylbenzene

SunShell C18, 2.6  $\mu$ m 150 x 4.6 mm

ガードカートリッジカラムなし

背圧: 28.8 MPa

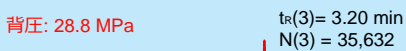

ガードカートリッジカラムRP接続

背圧: 31.4 MPa



### SunShellガードカートリッジカラムの価格

	型番	価格
SunShell ガードカートリッジカラム RP スターターキット (ホルダー, カートリッジ, カブラ各1個)	CB32CK	¥25,000
SunShell ガードカートリッジ RP 交換用 (2個入り)	CB32CC	¥15,000
SunShell ガードカートリッジカラム S スターターキット (ホルダー, カートリッジ, カブラ各1個)	CS32CK	¥25,000
SunShell ガードカートリッジ S 交換用 (2個入り)	CS32CC	¥15,000
SunShell ガードカートリッジホルダー	HOL2CC	¥15,000

開発・製造・発売元

1904

株式会社 クロマニックテクノロジーズ

代表取締役社長 長江 徳和

552-0001 大阪府大阪市港区波除6-3-1

TEL: 06-6581-0885 FAX: 06-6581-0890

E-mail: info@chromanik.co.jp

URL: http://chromanik.co.jp