


# メタルフリーカラム

## Biocompatible column

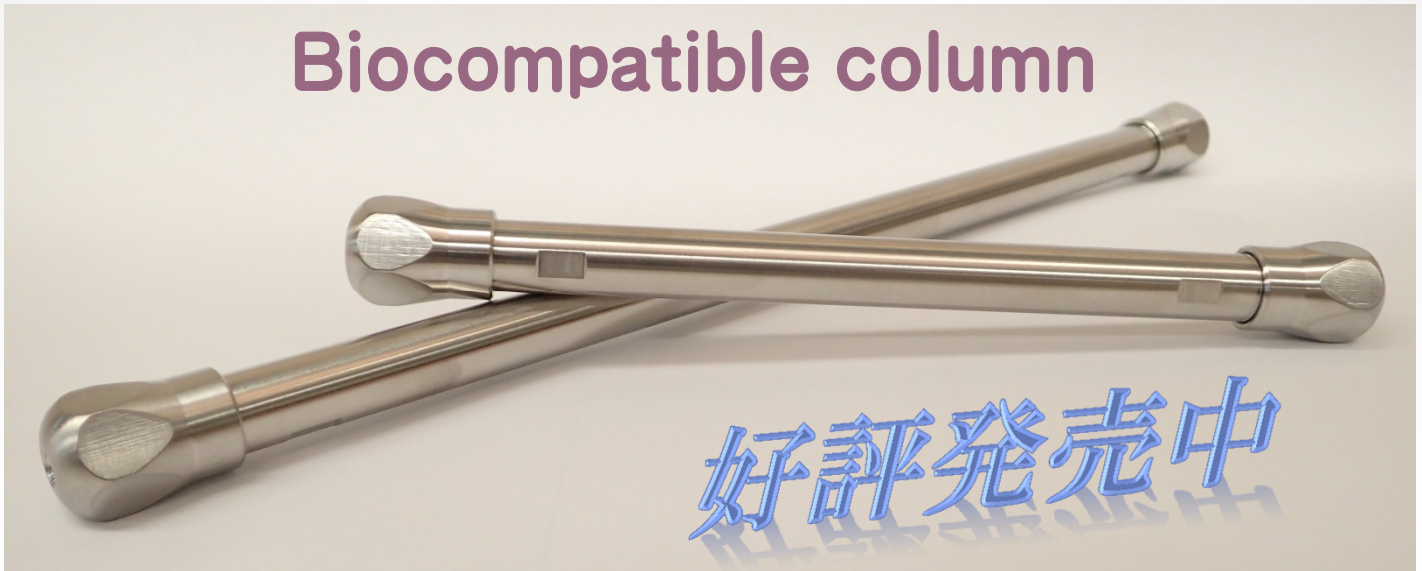

### 高耐圧 PEEKカラム

★ 100MPa耐圧のPEEKカラムハードウェアです。このカラムではPEEK管の外側をステンレスで覆った二重管構造を採用しているため、接液部がメタルフリーで、孔径0.5 μmのフリットを用いているため、サブ2 μm粒子径の充填剤まで対応可能です。推奨配管接続はフェラルを用いないタイプのもの (IDEX社製Marvel Xなど)、または樹脂フェラルとオシネジが別々のもの (IDEX社製VHP-320など)

### 仕様

材質：内側 (接液部分) はPEEK, 外側はステンレス

対応可能な粒子径：2 μm, 3 μm, 5 μm

対応可能な充填剤：SunShell, Sunniest, SumArmor, Sunriseシリーズ

カラムサイズ：4.6 x 150 mm, 4.6 x 250mm, 2.1 x 150 mm

型番はそれぞれのカラム型番最後の文字の1の代わりにMと表示

### 価格例

それぞれのカラムの価格プラス30,000円 (2018年12月27日受注分までは25,000円)

- 1) SunShell C18, 2.6 μm 2.1 x 150 mm, 型番CB697M, 114,000円
- 2) Sunniest C18, 5 μm 4.6 x 250 mm, 型番EB348M, 90,000円
- 3) SunArmor RP-AQUA, 3 μm 4.6 x 150 mm, 型番HR247M, 87,000円

\* 納期につきましては、完全受注製品ですので、お時間を頂くことがあります。

## クロマニックテクノロジーズ